



Mascarilla Facial Total para VNI FitMax™

para su uso en CPAP y ventilación Binivel




Cuidados Intensivos ▪ Mascarilla Facial Total para VNI FitMax™

Mascarilla Facial Total para VNI FitMax™

La mascarilla Facial Total FitMax es una mascarilla de VNI de un solo uso para pacientes adultos (>30kg) diseñada para administrar terapias CPAP o Binivel en un ambiente hospitalario. El diseño de la mascarilla ayuda a eliminar los problemas en el puente nasal asociados a las mascarillas oronasales tradicionales. FitMax es fácil de ajustar y está disponible en tres tamaños para ajustarse a la mayoría de los pacientes.

Se proporcionan dos tipos de codos con código de color para las diferentes situaciones clínicas - un codo con puerto exhalatorio y válvula anti-asfisia para su uso con circuitos de un solo ramal y un codo estándar para su uso con circuitos de doble ramal.

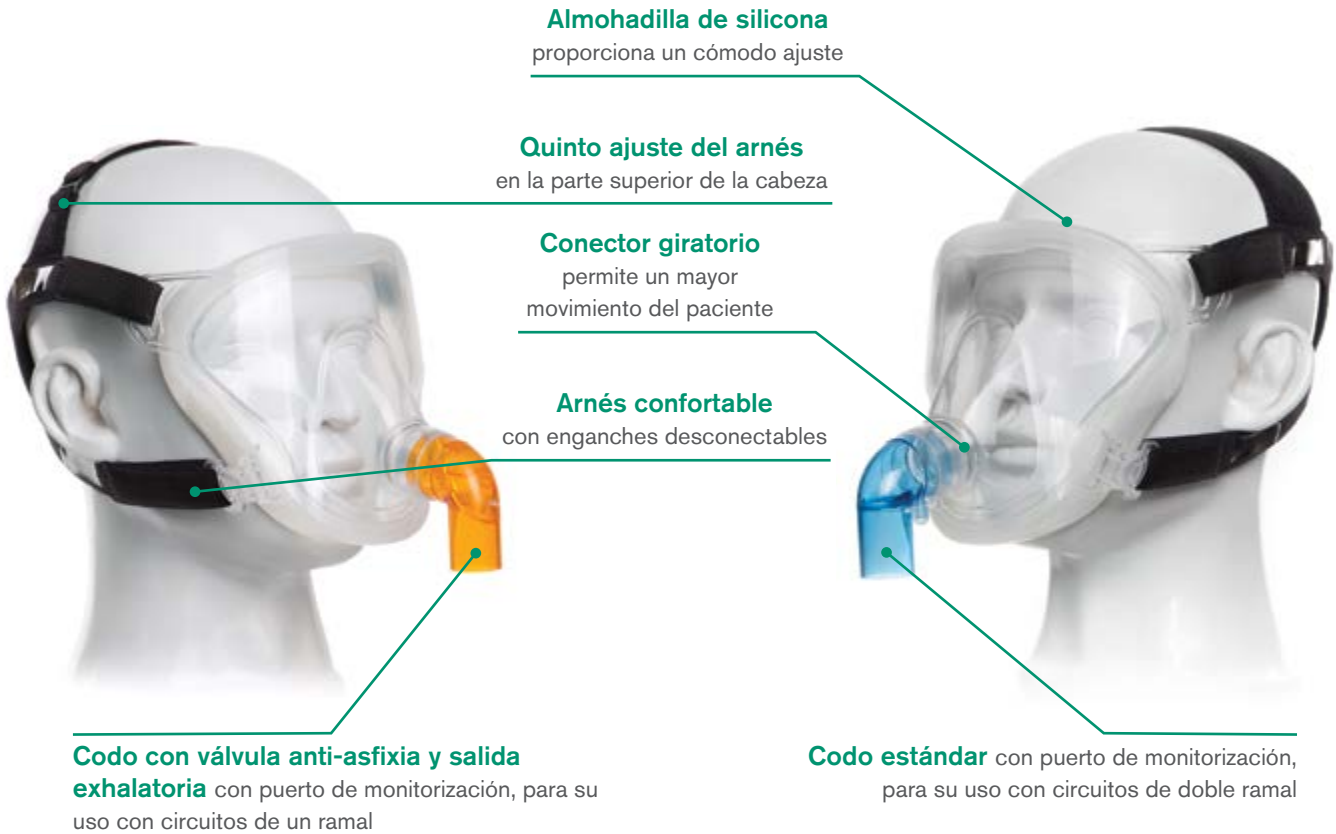

Almohadilla de silicona
proporciona un cómodo ajuste

Quinto ajuste del arnés
en la parte superior de la cabeza

Conector giratorio
permite un mayor movimiento del paciente

Arnés confortable
con enganches desconectables

Codo con válvula anti-asfisia y salida exhalatoria con puerto de monitorización, para su uso con circuitos de un ramal

Codo estándar con puerto de monitorización, para su uso con circuitos de doble ramal

Referencia	Descripción	Código de color del codo	Uds./caja
Para su uso con circuitos de un solo ramal			
2290020	Mascarilla Facial Total para VNI FitMax, codo con válvula anti-asfisia y salida exhalatoria, arnés, mediana	●	10
2290030	Mascarilla Facial Total para VNI FitMax, codo con válvula anti-asfisia y salida exhalatoria, arnés, grande	●	10
2290040	Mascarilla Facial Total para VNI FitMax, codo con válvula anti-asfisia y salida exhalatoria, arnés, extra grande	●	5
Para su uso con circuitos de doble ramal			
2290070	Mascarilla Facial Total para VNI FitMax, codo estándar, arnés, mediana	●	10
2290080	Mascarilla Facial Total para VNI FitMax, codo estándar, arnés, grande	●	10
2290090	Mascarilla Facial Total para VNI FitMax, codo estándar, arnés, extra grande	●	5

Consúltenos

Las mascarillas FitMax están fabricadas por Besmed Health Business Corporation, Taiwan y distribuidas por Intersurgical Ltd

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel.

IS1.52 ES • Issue 1 01.21



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia