



STARMed CaStar Ped

Casco pediátrico para terapia CPAP y ventilación mecánica no invasiva (VNI)



Cuidados intensivos ▪ Interfaces para paciente ▪ **STARMed**

Casco StarMed CaStar Ped pediátrico para terapia CPAP y VNI

StarMed CaStar Ped

El casco CaStar Ped es una interfaz para CPAP y VNI cómoda, versátil y ligera para pacientes pediátricos. Está diseñado para ofrecer una alternativa a los métodos tradicionales de administración de CPAP y VNI. El casco CaStar Ped se tolera bien durante periodos prolongados y puede reducir los riesgos asociados tanto a la intubación endotraqueal como al uso de mascarilla facial. Puede utilizarse tanto en posición semirecostada como supina, proporcionando una opción ideal para la terapia CPAP y VNI.


Características técnicas

- Fabricado con materiales sin ftalatos
- Conectores 22M/22F que cumplen la normativa ISO (versión CPAP)
- Conectores 22M que cumplen la normativa ISO (versión VNI)

- Equipado con manómetro integrado para comprobar la presión dentro del casco (solo versión CPAP)
- Correas de sujeción por debajo de los brazos, cómodas y atraumáticas
- Dos puertos de acceso sellados y versátiles, adecuados para sondas o catéteres de diversos calibres
- Puerto de acceso al paciente de nuevo diseño. Equipado con válvula antiasfixia bidireccional que se abre automáticamente en caso de caída de presión
- La estanqueidad del sistema se consigue gracias a una membrana elástica que entra en contacto con la parte superior del torso, una vez que se infla el casco

Bibliografía:

- Piastra M, et al. Noninvasive pressure-support ventilation in immunocompromised children with ARDS: a feasibility study, Intensive Care Med. 2009 Aug;35(8):1420-7
- Piastra M, et al. Treatment of acute respiratory failure by helmet-delivered non-invasive pressure support ventilation in children with acute leukemia: a pilot study, Intensive Care Med. 2004 Mar;30(3):472-6

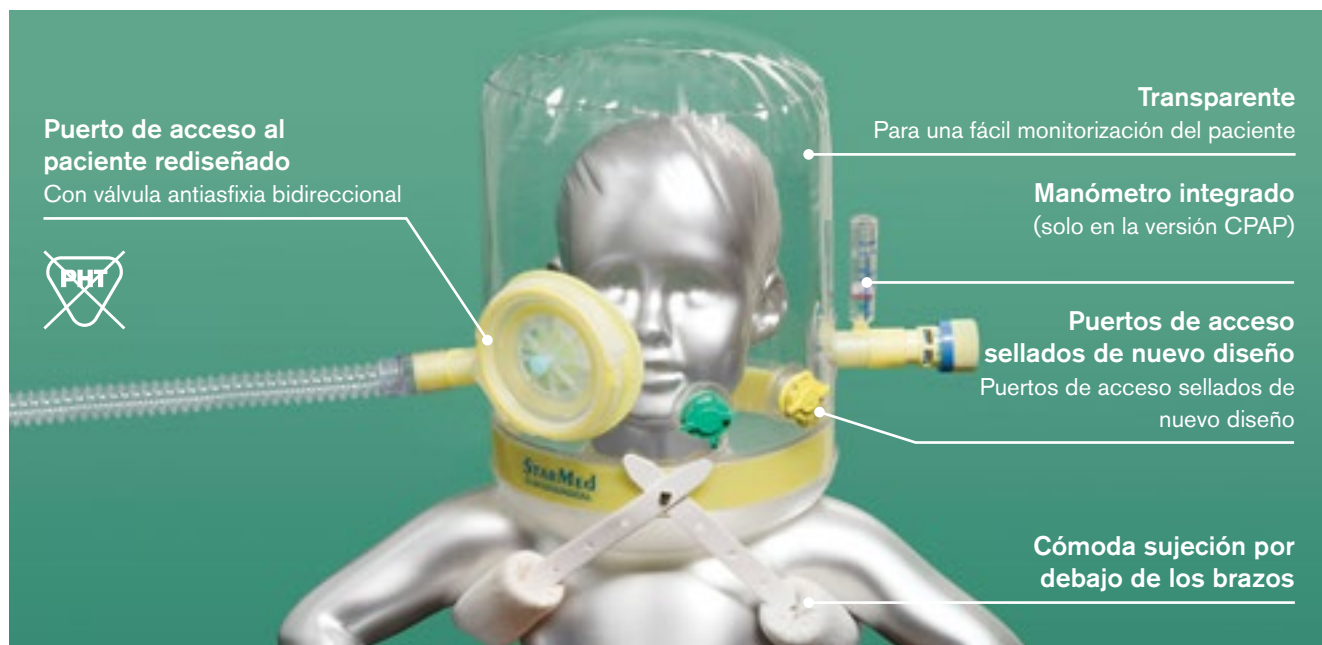

Casco CaStar Ped pediátrico para terapia CPAP y VNI con válvula antiasfixia bidireccional y puerto de acceso al paciente*

Referencia	Descripción	Peso del paciente	Uds./caja
CP201PED/2R	CaStar R Ped para VNI con conexiones 22M/22M	>15Kgs	5
CP200PED/2	CaStar Ped para CPAP con conexiones 22M/22F	>12Kgs	5

*La válvula PEEP y la tubuladura no se incluyen y deben pedirse por separado. Consulte la página web para conocer toda la gama de accesorios.



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



Fabricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italia

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS1.19_ES • Issue 8 06.20