



# STARMed CaStar R Up

Casco de apertura rápida para ventilación mecánica no invasiva (VNI)



Cuidados intensivos ▪ Interfaces para paciente ▪ **STARMed**



## Casco StarMed CaStar R Up de apertura rápida para VNI

### StarMed CaStar R Up

El casco CaStar R Up de apertura rápida es una interfaz cómoda, versátil y ligera para ventilación mecánica no invasiva (VNI), diseñada para ofrecer una alternativa a los métodos tradicionales de administración de VNI. El casco CaStar R Up se tolera bien durante periodos prolongados y puede reducir los riesgos asociados tanto a la intubación endotraqueal como al uso de mascarilla facial. Puede utilizarse en posición semirecostada, supina y prona, proporcionando una opción ideal para la terapia de VNI.


### Ventajas

- Permite el acceso rápido al paciente durante los procedimientos de enfermería o en caso de emergencia
- Un facultativo puede retirar fácilmente la parte superior del casco y tener acceso completo al paciente
- Las sondas y los catéteres pueden permanecer en su lugar, en el paciente, conectados a la parte inferior del casco

### Características técnicas

- Fabricado con materiales sin ftalatos
- Conectores 22M que cumplen la normativa ISO
- Almohadilla inflable integrada para mayor comodidad del paciente
- Correas de sujeción por debajo de los brazos, cómodas y atraumáticas
- En caso de que se requiera, están disponibles otros accesorios de fijación
- Dos puertos de acceso sellados y versátiles, adecuados para sondas o catéteres de uno o varios lúmenes
- Puerto de acceso al paciente de nuevo diseño. Equipado con válvula antiasfíxia bidireccional que se abre automáticamente en caso de caída de presión
- La estanqueidad del sistema se consigue gracias a una membrana elástica que entra en contacto con la parte superior del torso, una vez que se infla el casco

Lea más evidencias en [www.intersurgical-es.com](http://www.intersurgical-es.com)

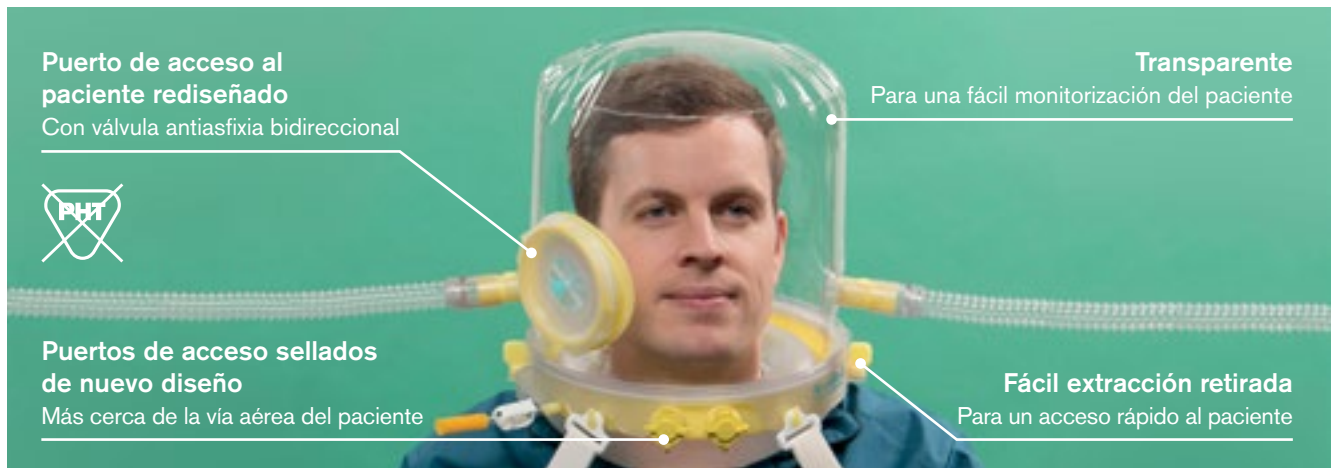

## Casco CaStar Up de apertura rápida para VNI con almohadilla inflable, válvula antiasfíxia bidireccional y puerto de acceso al paciente\*

Referencia	Tamaño	Circunferencia del cuello	Uds./caja
CA022XXL/2R	Extra Extra Grande	≥50cm	5
CA022XL/2R	Extra Grande	45-52cm	5
CA022L/2R	Grande	40-47cm	5
CA022M/2R	Mediano	34-41cm	5
CA022S/2R	Pequeño	27-34cm	5
CA022XS/2R	Extra Pequeño	17-27cm	5

\* La tubuladura no está incluida y debe pedirse por separado. Consulte la página web para conocer toda la gama de accesorios.



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



Fabricante:  
Intersurgical S.p.A.  
Mirandola (MO) Italia

Por favor, piénselo antes de imprimir.  
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS1.39\_ES • Issue 5 06.20