




# Cánulas Guedel de una sola pieza

Seguridad en el diseño

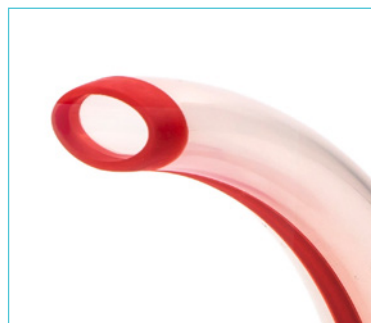

## Cánulas Guedel de una sola pieza

### Seguridad en el diseño

Gracias a las últimas tecnologías en fabricación, Intersurgical ha conseguido el primer gran avance en el diseño de cánulas Guedel en los últimos treinta años.

Combinando dos materiales con características muy diferentes en un único molde, nuestro diseño de una sola pieza elimina los bloques de mordida separados que se encuentran en todas las cánulas Guedel convencionales.

Los bloques de la zona de mordida sueltos o separados constituyen un riesgo para la seguridad del paciente y han sido objeto de varias alertas sanitarias en el pasado. Nuestro diseño de una sola pieza evita todos estos riesgos asociados.

Además de la mejora en seguridad, el diseño de una sola pieza también incorpora una punta suave que reduce el riesgo de traumatismo al paciente. También ofrecemos una versión estéril, proporcionándole una opción extra.





## Normativa ISO 5364:2016 - Guía del código de colores

En la versión más reciente de la normativa ISO 5364:2016 Equipo de anestesia y respiratorio - Vías aéreas orofaríngeas, se implementó un nuevo requisito de codificación de colores, con el objetivo de proporcionar coherencia entre los fabricantes y mejorar la seguridad del paciente.

Para cumplir con el sistema de codificación de colores especificado en la normativa ISO 5364:2016, ha sido necesario que Intersurgical actualice cuatro tamaños de guedels. Los tamaños que han cambiado son los siguientes:

- Tamaño ISO 9.0; del Naranja a Amarillo
- Tamaño ISO 7.0; del Amarillo a Blanco
- Tamaño ISO 6.5; del Blanco a Marrón
- Tamaño ISO 3.5; del Rosa al Verde Claro



Los cuatro tamaños de las cánulas guedel de Intersurgical que han cambiado sus colores para ajustarse a la normativa actualizada.

Cada departamento tendrá que considerar localmente cómo se aplicará el cambio, ya que puede llevar algún tiempo utilizar el stock existente.

Referencia	Tamaño ISO
1115120 (S*)	12.0
1114100 (S*)	10.0
1113090 (S*)	9.0
1112080 (S*)	8.0
1111570 (S*)	7.0
1111065 (S*)	6.5
1110055 (S*)	5.5
1100050 (S*)	5.0
1000035 (S*)	3.5

Color Intersurgical anterior	
Morado	
Rojo	
Naranja	
Verde	
Amarillo	
Blanco	
Gris	
Azul	
Rosa	

Nuevo color que cumple la normativa ISO	
Morado	
Rojo	
Amarillo	<b>NUEVO</b>
Verde	
Blanco	<b>NUEVO</b>
Marrón	<b>NUEVO</b>
Gris	
Azul	
Verde claro	<b>NUEVO</b>

Este cambio de color afecta a todas las cánulas guedel de Intersurgical, incluidas las opciones de envasado a granel.

Opción estéril disponible

(S\*) Añada una S a la referencia de siete dígitos para la versión estéril de este producto, por ejemplo 5000000S.

## Punta aún más suave

Siguiendo la incitativa de dar prioridad a la seguridad del paciente, Intersurgical ha incrementado la suavidad del material de la punta de sus cánulas guedel.

Las cánulas guedel que utilizan materiales duros y rígidos en la punta, representan una amenaza significativa de causar un traumatismo al ser insertadas. Al utilizar un material aún más suave en la punta de las cánulas guedel, se reduce aún más la posibilidad de causar traumatismo en las vías respiratorias del paciente durante la inserción.



Referencia	Descripción	Color	Tamaño	ISO	Uds./caja
1115120 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		5	12.0	70 (70*)
1114100 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		4	10.0	90 (80*)
1113090 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		3	9.0	90 (80*)
1112080 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		2	8.0	100 (100*)
1111570 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		1.5	7.0	100 (100*)
1111065 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		1	6.5	20 (20*)
1110055 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		0	5.5	25 (25*)
1100050 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		00	5.0	25 (25*)
1000035 (S*)	Cánula Guedel de una sola pieza		000	3.5	25 (25*)

[Consúltenos](#)
[Más información](#)
[Ver video](#)

Producto de bajo impacto ambiental Opción estéril disponible

(S\*) Añada una S a la referencia de siete dígitos para la versión estéril de este producto, por ejemplo 5000000S.

IS6.10 ES • Issue 7 07.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

**Por favor, piénselo antes de imprimir.**  
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan  
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA