




Mascarilla de alta concentración de oxígeno Intersurgical EcoLite™ de adulto



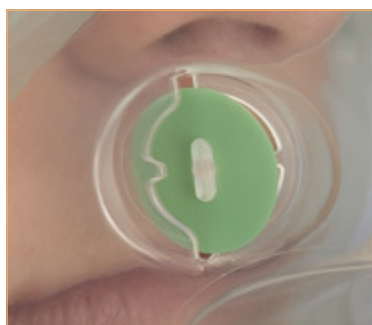

Mascarilla de alta concentración de oxígeno Intersurgical EcoLite™ de adulto

Bienvenido a la Zona Confort

El diseño único y los materiales empleados en la fabricación de la mascarilla EcoLite de Intersurgical proporcionan un mayor confort del paciente y un menor impacto medioambiental.

Cómodo para el Paciente

Mejorar la comodidad y la seguridad del paciente ha sido primordial en el desarrollo de la mascarilla EcoLite de Intersurgical. Mediante la utilización de la última tecnología de fabricación, hemos combinado dos materiales sin PVC en el mismo producto. El polipropileno se utiliza en la fabricación de la carcasa de la mascarilla EcoLite de Intersurgical, transparente, ligera y con la rigidez necesaria para mantener la forma de la mascarilla, mientras que el segundo material (TPE) es muy suave y se utiliza en la fabricación del contorno de la mascarilla, en contacto con la cara del paciente.

Ajuste nasal integrado

Se adapta a las diferentes morfologías nasales, lo que minimiza el riesgo de fugas de oxígeno hacia los ojos del paciente

Sin pinza metálica de ajuste nasal

Compatible con Resonancia Magnética

Mascarilla transparente

Permite la visualización de la nariz y los labios del paciente

Dos válvulas de seguridad integradas

Permiten que el paciente respire aire ambiente en caso de fallo en el suministro de oxígeno

Respetuoso con el Medio Ambiente

La mascarilla EcoLite de Intersurgical es una parte importante de la gama Eco, diseñada como parte de nuestro enfoque continuo en el desarrollo sostenible. Se ha cuestionado ampliamente el uso de PVC en los dispositivos de uso médico y su impacto sobre el medio ambiente. El uso de materiales alternativos ha permitido eliminar el PVC de la mascarilla EcoLite de Intersurgical, reduciendo su impacto medioambiental.

Intersurgical EcoLite

Más información

Rango Eco

Más información



Sellado facial suave


Mejora la comodidad del paciente

Banda elástica por encima o por debajo de las orejas

Al posicionarla debajo de las orejas elimina la posibilidad de daños por rozamiento en la parte superior de las orejas

Posición "bajo la barbilla" o "sobre la barbilla"

Proporciona un mejor ajuste en un amplio rango de anatomías faciales

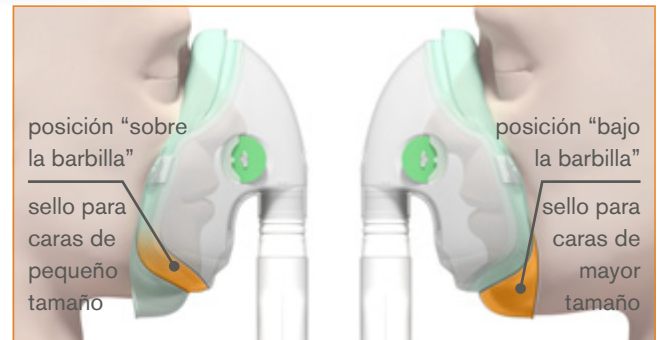

Referencia	Descripción	Long. línea	Uds./caja
1181015	Mascarilla de alta concentración de oxígeno EcoLite de adulto con línea	2.1m	24

Consúltenos Ver video

Producto de menor impacto ambiental. Nota: la bolsa reservorio y la línea contienen PVC.

IS10.17 ES • Issue 10 09.23



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, por favor hágalo por las dos caras.